

000/0060.051/20



Coohy-tex, pansement Hydrogel (20cm x 40cm)

Coohy-tex est un pansement Hydrogel riche en eau pour soigner les écorchures et la peau échauffée. Coohy-tex refroidit la peau échauffée, adoucit la douleur et protège contre des infections.



Propriétés


Dimensions: 20 x 40 cm. Pansement Hydrogel riche en eau. Coohy-tex refroidit la peau et adoucit la douleur. Ne colle pas à la plaie. Protège la plaie contre des infections et de la dessiccation. Diminue la cicatrisation. S'adapte parfaitement aux formes du corps. Peut être enlever sans douleur. Anti-allergène. Biodégradable.

Applications

Soin temporaire de: Ecorchures mineures, brûlures du premier degré, peau échauffée ou déshydratée.

Utilisation

Ouvrir l'emballage et sortir le pansement Hydrogel. Saisir le fibre-filet pour le faire sortir hors du moule. Appliquer le pansement Hydrogel sur la plaie avec le fibre-filet en dessus, éloigner le film et fixer avec un bandage. Consulter un médecin. Le pansement Hydrogel peut rester sur la plaie jusqu'à 12 heures.

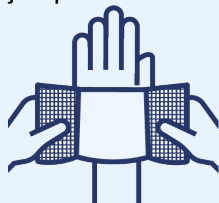

Contenu

Pièce.

Préservation

Emballé individuellement dans un emballage de polyamide-polyethylene. Conserver dans un endroit sec entre 0°C et 25°C. Date d'expiration: 5 ans après la date de production. Coohy-tex est un dispositif médical.

Version: 05/05/2024